

MIO LINK

GEBRUIKERSHANDLEIDING



INHOUDSOPGAVE

Welkom

- 03 Aan de slag gaan
- 03 Belangrijke veiligheidsinformatie
- 04 IUw Mio LINK

Mio LINK gebruiken

- 05 De hartslagmeting starten
- 06 Hartslagzones
- 07 Hartslagzones aanpassen

Mio LINK met andere apparaten en apps gebruiken

- 08 Koppelen met apps
- 09 Koppelen met toestellen die het signaal zullen ontvangen zoals bijvoorbeeld fietscomputers

Uw Mio LINK onderhouden

- 09 De batterij opladen
- 10 Mio LINK gebruiken in vochtige omstandigheden
- 11 Zorg dragen voor uw Mio LINK
- 11 Mio LINK specificaties

Garantie en juridische bepalingen

- 12 Garantie & dienstverlening
- 13 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid; disclaimers
- 14 Copyright en Handelsmerken
- 15 Wetgeving & Conformiteit

HEEFT U VRAGEN OVER UW MIO LINK?

Wij helpen u graag verder!

Pas als u volkomen tevreden bent, zijn ook wij tevreden. Twijfel niet om ons uw feedback te bezorgen.

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons toegewijd ondersteuningsteam op:



1.877.770.1116



support@mioglobal.com



mioglobal.com/support



facebook.com/mioglobal



twitter.com/mioglobal

WELKOM

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Mio LINK de eerste hartslagmeter geïntegreerd in een polsband die continu gegevens van de hartslag doorstuurt naar apps of fitnessstoestellen. Mio LINK maakt gebruik van ANT+™ en Bluetooth® Smart om gegevens over uw hartslag te versturen naar een smartphone of andere compatibele apparaten. Download de Mio GO app voor een gepersonaliseerde en interactieve training of ga aan de slag met talloze andere apps.

Niet vergeten om uw Mio LINK te registreren via de Mio GO app of online op mioglobal.com/register om te kunnen genieten van de volledige garantie.

AAN DE SLAG GAAN

Wat zit er in de verpakking?

1. Mio LINK
2. USB-dongle
3. Beknopte handleiding




BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg een arts vooraleer u van start gaat met een nieuw trainingsprogramma.

Mio LINK zorgt voor een uiterst nauwkeurige hartslagmeting. Het is echter geen medisch apparaat. De Mio LINK en de USB-lader bevatten sterke magneten. Indien u een pacemaker, een defibrillator of een ander elektronisch implantaat hebt, raadpleeg dan een arts vooraleer van start te gaan met de Mio LINK.

Raadpleeg het hoofdstuk **De batterij opladen** voor belangrijke informatie over het onderhoud en het veilig gebruik van de batterij.

IJW MIO LINK

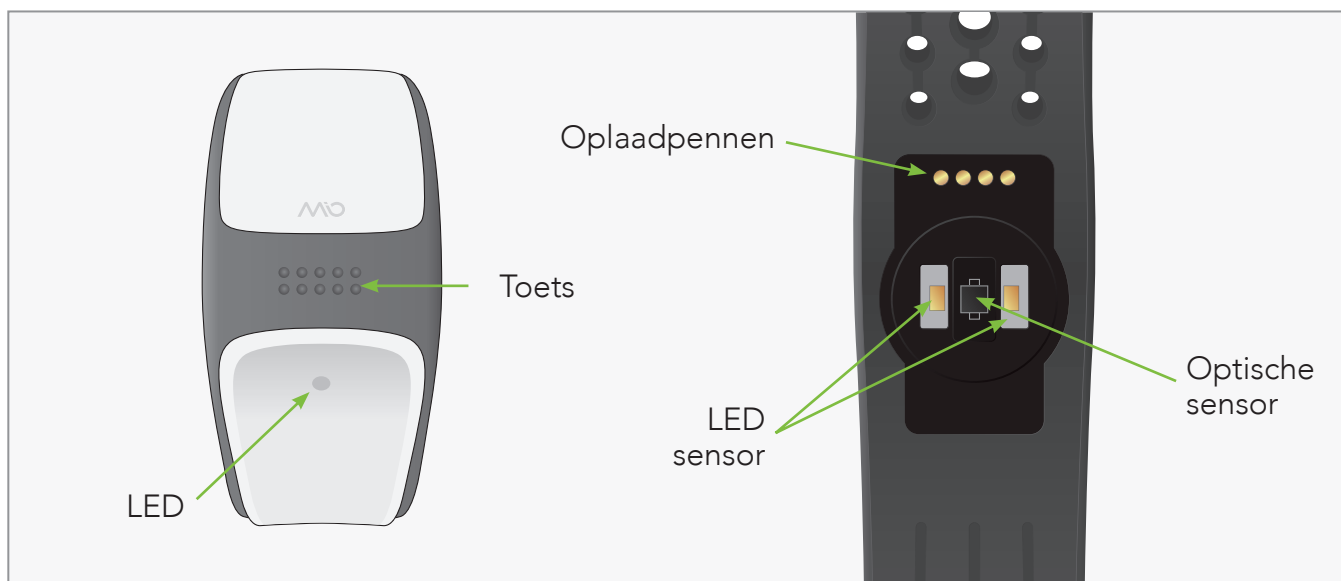


Uw Mio LINK activeren

1. Haal de Mio LINK uit de verpakking.
2. Druk de toets in en houdt de toets ingedrukt om uw LINK te activeren. De LED zal oplichten.
3. Na enkele seconden zal de LED stoppen met branden.
4. Mio LINK is nu geactiveerd.

Uw Mio LINK dragen


Om uw hartslag nauwkeurig op te volgen:

1. Trek de Mio LINK goed vast en positioneer hem ongeveer 2 centimeter boven uw polsgewricht. De optische sensor aan de achterkant moet contact maken met uw huid.

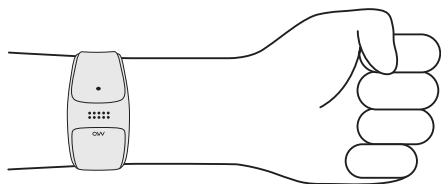

2. Als u een smallere pols hebt, draag de LINK dan hoger op uw onderarm.
3. Als u de LINK gebruikt tijdens het fietsen, draag de band dan hoger op je onderarm, aangezien het buigen van de pols invloed kan hebben op de hartslagmeting.

4. Fietsers of sporters met een holle pols kunnen de Mio LINK omgekeerd dragen zodat de sensor aan de onderkant van de bovenarm contact kan maken.

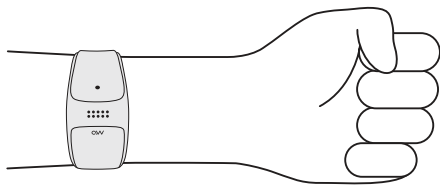

5. Breng zowel de Mio LINK als de sporthorloge aan op dezelfde onderarm ter bevordering van de ANT+-verbinding.
6. Als u vaak koude handen hebt of last hebt van een minder goede bloedcirculatie, probeer de bloedcirculatie dan gedurende een paar minuten te stimuleren met enkele oefeningen vooraleer u van start gaat met opvolgen van uw hartslag.

MIO LINK GEBRUIKEN

DE HARTSLAGMETING STARTEN

Uw huidige hartslag wordt weergegeven zodra u uw Mio LINK in de modus Hartslag (HR) zet. U dient de Mio LINK te dragen om een accurate hartslagmeting te verkrijgen. Het is mogelijk dat het enkele seconden duurt vooraleer de hartslagmeting stabiliseert omdat uw lichaam zich aanpast aan de fysieke inspanning die wordt geleverd. Wij raden aan om reeds tijdens de opwarming de modus Hartslag (HR) te activeren.

De modus Hartslag (HR) activeren

1. Druk en houd de Toets ingedrukt tot de LED oplicht. Zorg ervoor dat u stil staat. De kleur van de LED geeft het batterijniveau aan. (Raadpleeg het hoofdstuk **De batterij opladen** voor meer informatie.)
2. Mio LINK zal meteen op zoek gaan naar uw hartslag en die weergeven aan de hand van de knipperende LED.
3. Houd uw arm stil tot de LED duidelijk trager gaat knipperen. Dit betekent dat de Mio LINK uw hartslag heeft gevonden. Nu geeft de kleur van de LED uw hartslagzone weer. Meer details zijn ter beschikking in het hoofdstuk **Hartslagzones**.

Indien er tijdens de eerste 2 minuten geen geldig hartslagsignaal wordt herkend, dan zal de LED gedurende 2 seconden rood oplichten en zal de LINK automatisch de modus Hartslag (HR) verlaten en uitgeschakeld worden. Raadpleeg het hoofdstuk **Problemen oplossen**.

Indien u tijdens het trainen vaststelt dat de LED in een vast patroon oplicht (AAN gedurende 1 seconde en UIT gedurende 1 seconde) dan is de Mio LINK uw hartslag kwijt. Raadpleeg het hoofdstuk **Problemen oplossen**.

De modus Hartslag (HR) uitschakelen

Om de Mio LINK uit te schakelen, drukt u op de knop en houdt u ze ingedrukt tot het LED-lampje stopt met branden. Zodra het LED-lampje stopt met branden, is uw Mio LINK uitgeschakeld. (Raadpleeg het hoofdstuk **De batterij opladen** voor meer informatie.)

Problemen oplossen

- Minimaliseer uw polsbeweging wanneer de Mio LINK de eerste keer zoekt naar uw hartslag.
- Het is mogelijk dat u de polsband steviger dient aan te trekken.
- Probeer de Mio LINK hoger te positioneren op uw onderarm, boven het polsgewricht.
- Op koudere dagen is het aanbevolen om de hartslagmeting te activeren vooraleer naar buiten te gaan.
- Probeer de Mio LINK uit op uw andere arm.

HARTSLAGZONES

Uw streefhartslag (HR) is gebaseerd op de ondergrens en de bovengrens van uw hartslag. Deze boven- en ondergrenzen zijn doorgaans een percentage van uw maximale hartslag (MHR). Indien u uw maximale hartslag (MHR) noch de onder- en de bovengrens van uw hartslag kent, raadpleeg dan uw arts of gebruik onderstaande berekeningsmethode als leidraad:

$$MHR = 208 - (0.7 \times \text{Age})$$

Gebruik van de waarschuwingssignalen voor de hartslagzones

De modus Trainingszone is standaard ingesteld op de Mio LINK. Raadpleeg het hoofdstuk Hartslagzones aanpassen om de modus Zonewaarschuwing te activeren of om de boven- en ondergrens van elke hartslagzone in te stellen.

De modus Trainingszone (5 zones)

De LED zal langzaam knipperen om uw huidige hartslagzone weer te geven. U kunt de boven- en ondergrens van elke hartslagzone instellen met de Mio GO app. Raadpleeg het hoofdstuk Hartslagzones aanpassen voor meer details.

KLEUR	BESCHRIJVING	ONDERGRENS HARTSLAG	BOVENGRENS HARTSLAG
● Lichtblauw	Rusttoestand	0% van de MHR	< 50% van de MHR
● Blauw	Zeer licht	50% van de MHR	< 60% van de MHR
● Groen	Licht	60% van de MHR	< 70% van de MHR
● Geel	Gemiddeld	70% van de MHR	< 80% van de MHR
● Roze	Intens	80% van de MHR	< 90% van de MHR
● Rood	Maximum	90% van de MHR	220 SPM

Opmerking: Dit overzicht geeft enkel een indicatie.

De modus Zonewaarschuwing [3 zones]

In de modus Zonewaarschuwing zal de LED langzaam knipperen om aan te geven of uw hartslag zich boven, onder of in de streefhartslagzone bevindt. Indien de LED twee keer knippert dan betekent dit dat uw hartslag zich met minstens meer dan 10 s/min buiten de streefhartslagzone bevindt.

KLEUR	BESCHRIJVING	ONDERGRENS HARTSLAG	BOVENGRENS HARTSLAG
● Blauw	Onder de streefhartslagzone	0% van de MHR	< 65% van de MHR
● Groen	In de streefhartslagzone	65% van de MHR	< 85% van de MHR
● Rood	Boven de streefhartslagzone	85% van de MHR	100% van de MHR

Opmerking: Dit overzicht geeft enkel een indicatie.

HARTSLAGZONES AANPASSEN

Om de kracht van uw Mio LINK ten volle te benutten, dient u uw Mio LINK te configureren met de Mio GO app. Mio GO maakt het mogelijk om:

- Te switchen tussen de modus Trainingszone en de modus Zonewaarschuwing
- De boven- en ondergrens van elke hartslagzone in te stellen
- Uw Mio LINK te registreren zodat u kan genieten van de volledige garantiedekking en updates.

De Mio GO app is beschikbaar als download in de Apple App Store en op Google Play.

Opmerking: Momenteel is de Android-versie van Mio GO app enkel beschikbaar voor installatie. De ondersteuning van alle functionaliteiten zal spoedig ter beschikking zijn.

Uw Mio LINK configureren

1. Doe uw Mio LINK om en activeer hem.
2. Activeer Bluetooth op uw smartphone of tablet.
3. Open de Mio GO app op uw smartphone of tablet. Indien u de app voor de eerste keer opent, zal u gevraagd worden om uw Mio LINK te registreren en aan te koppelen, en vervolgens ook om een gebruikersprofiel aan te maken. Voor meer details over het koppelen van uw Mio LINK met Mio GO kunt u terecht in het hoofdstuk **Mio LINK met andere apparaten en apps gebruiken**.
4. Tik op het pictogram Verbinden om alle eerder aangekoppelde toestellen weer te geven.
5. Selecteer uw Mio LINK in de lijst met eerder aangekoppelde toestellen. Zodra uw Mio LINK gekoppeld is aan de Mio GO zal de toets **Setup Mio LINK** (Installatie Mio LINK) verschijnen.
6. Tik op de toets **Setup Mio LINK** (Installatie Mio LINK) om het configuratiemenu van uw Mio LINK te openen.

7. Op het scherm zal duidelijk weergegeven worden of uw Mio LINK zich in de modus Trainingszone of in Zonewaarschuwing bevindt.
8. Selecteer de modus **Zone Alert Mode** (Zonewaarschuwing) of **Training Zone Mode** (Trainingszone).
9. Kies om de onder- en bovengrens van uw maximale hartslag in te stellen als % van de maximale hartslag (Max HR) of als SPM (slagen per minuut).
10. Tik op elke zone om de onder- en bovengrens aan te passen. Tik op **Done** (Klaar).
11. Tik op **Save Zone Settings** om de instellingen te bewaren.
12. Uw Mio LINK is nu ingesteld en helemaal klaar voor gebruik!

Voor meer informatie of voor hulp bij het configureren van uw Mio LINK kunt u terecht op mioglobal.com/support.

MIO LINK MET ANDERE APPARATEN EN APPS GEBRUIKEN

Mio LINK kan aangewend worden als een stand-alone hartslagmeter met een indicator voor elke hartslagzone. U kunt echter ook uw hartslaggegevens in realtime versturen naar iedere compatibele smartphone of fitnessstoestel via ANT+ of *Bluetooth Smart*. Koppel uw Mio LINK aan een compatibel toestel om ten volle gebruik te kunnen maken van de talloze mogelijkheden die fitnessapps te bieden hebben. Raadpleeg mioglobal.com/apps voor een volledige lijst met compatibele toestellen.

Compatibele toestellen zullen de hartslaggegevens uitsluitend in realtime capteren. Het is vereist om het toestel bij u te hebben wanneer u uw hartslag wilt meten.

AAN DE SLAG MET EEN ONTVANGER

- Wanneer de Mio LINK zich in de modus Hartslag bevindt, zal hij de hartslaggegevens draadloos en simultaan versturen via *Bluetooth Smart* en ANT+ waardoor de Mio LINK gevonden kan worden op compatibele toestellen. Indien nodig kunt u ook een ANT+-dongle aankopen wanneer u uw Mio LINK koopt.
- Draag het toestel waarmee u de gegevens wilt ontvangen op uw arm, in uw broekzak of voor u op een broeksriem of op het stuur van een fiets. Zorg ervoor dat het toestel zich niet achter u bevindt (bijvoorbeeld in een achterzak of een rugzak) aangezien de ANT+ de signalen niet doorheen uw lichaam kan versturen.
- De berekening van de hartslag door de Mio LINK is niet gebaseerd op instant RR-interval en zal dus niet werken voor apps die hartslagvariabiliteit (HRV) vereisen.

Tip: *De eerste keer dat u de Mio LINK gebruikt met een toestel of een app dient u de Mio LINK te koppelen aan het desbetreffende toestel. Het koppelen van toestellen kan voor interferentie zorgen wanneer er zich nog andere sensoren en toestellen in de buurt bevinden.*

Tips voor het koppelen van toestellen

- Mio LINK dient zich in de modus Hartslag (HR) te bevinden.
- Breng het toestel dat de signalen zal ontvangen binnen een bereik van 3 meter van uw Mio LINK.
- Blijf minstens 10 meter verwijderd van andere sensoren of apparaten die gebruik maken van ANT+ of *Bluetooth*.
- Indien u problemen ondervindt met het verbinden van de Mio LINK met uw ANT+-sporthorloge (bijvoorbeeld Garmin of Suunto) breng dan zowel de Mio LINK als de sporthorloge aan op dezelfde arm.

KOPPELEN MET APPS

1. Indien u wilt koppelen via ANT+ sluit dan de ANT+-dongle aan. Indien u wilt koppelen via *Bluetooth Smart* activeer dan de functie *Bluetooth* op het desbetreffende toestel.
2. Doe uw Mio LINK om en activeer hem.
3. Open de app die u wenst te koppelen. De richtlijnen variëren per app maar doorgaans kunt in de instellingen van de app een functie vinden waarmee u een hartslagsensor kunt toevoegen of zoeken.

Opmerking: *Het koppelen dient te worden volbracht in de instellingen van de app en niet in de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.*

4. Herhaal bovenstaande stappen voor elke app. Zodra het koppelen gelukt is, zal uw Mio LINK voortaan meteen herkend worden zodra u de app gebruikt.

Opmerking: *Om te kunnen koppelen met een Android-app via Bluetooth Smart dient aan volgende vereisten te worden voldaan:*

- Uw toestel dient een Android 4.3 besturingssysteem te hebben (of nieuwer).
- Uw toestel dient *Bluetooth Smart Ready* te ondersteunen.
- De app dient *Bluetooth Smart* te ondersteunen.

Surf naar mioglobal.com/apps om te zien of uw Android-toestel voldoet aan de **compabiliteitsvereisten**.

KOPPELEN MET TOESTELLEN DIE HET SIGNAAL ZULLEN ONTVANGEN ZOALS BIJVOORBEELD FIETSCOMPUTERS

De richtlijnen variëren per toestel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant om hartslaggegevens te ontvangen van een borstriem; uw toestel zal de Mio LINK registreren.

UW MIO LINK ONDERHOUDEN

DE BATTERIJ OPLADEN

Mio LINK bevat een oplaadbare lithium-polymeer-batterij. Volg deze richtlijnen en aanwijzingen om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Indien u deze richtlijnen niet naleeft, is het mogelijk dat de levensduur van de batterij wordt ingekort en bestaat de kans dat de Mio LINK beschadigd geraakt, dat er brand ontstaat, dat de elektrolyt gaat lekken of dat er chemische verbranding en gevaar voor letsels ontstaat.

Laadniveau van de batterij

Er zijn twee manieren waarop u het laadniveau van de batterij van uw Mio LINK te weten kunt komen:

1. Telkens u de modus Hartslag aan- of uitschakelt zal de LED oplichten en het laadniveau van de batterij aangeven.

KLEUR	BATTERIJ
● Lichtblauw	Batterij is volledig opgeladen
● Geel	Het laadniveau van de batterij is lager dan 30%
● Rood (knippert 2 maal)	Het laadniveau van de batterij is te laag om een hartslagmeting uit te voeren.

2. Op het weergavescherm van de Mio GO app.

Opmerking: Uw Mio LINK dient gekoppeld te zijn aan Mio GO om deze functie te kunnen gebruiken.

Levensduur van de batterij

Telkens de batterij van uw Mio LINK volledig is opgeladen, kunt u hem gedurende 8 tot 10 uur gebruiken in de modus Hartslag.

Uw Mio LINK opladen

1. Zorg ervoor dat uw Mio LINK geactiveerd is.
2. **Waarschuwing:** Zorg ervoor dat de 4 oplaadpennen aan de achterzijde van de Mio LINK droog zijn. Indien ze vochtig zijn, maak ze dan droog met een handdoek.
3. Stop de USB-oplader in de USB-poort van uw computer.
4. Verbind de 4 oplaadpennen aan de achterzijde van uw Mio LINK met de 4 oplaadpennen van de USB-oplader. De magneten in de oplaadpennen zullen ervoor zorgen dat twee delen correct verbonden met elkaar gekoppeld worden.

De lichtblauw LED (●) zal langzaam pulseren om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, zal de LED stoppen met branden.

Richtlijnen voor het correct gebruik van de batterij

- Laad de batterij minstens om de 6 maanden op.
- Stel de Mio LINK nooit bloot aan hoge temperaturen.
- Gebruik uw Mio LINK binnen het temperatuurbereik van 5° C tot 45° C.
- Bewaar de Mio LINK binnen het temperatuurbereik van 0° C tot 25° C.
- Haal de polsband van de Mio LINK of de batterij nooit uit elkaar, maak er geen gaten in en verbrand ze nooit.
- Indien de behuizing van de polsband het begeeft en de batterij zichtbaar wordt, zorg er dan voor dat de batterij buiten bereik van kinderen blijft. Raadpleeg de lokale regelgeving om te weten te komen hoe u de polsband of de batterij dient te recyclen.

Batterij vervangen

- De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 300 oplaadcycli. Indien de batterij één keer per week wordt opgeladen, dan zal ze een levensduur van ongeveer 5 jaar bereiken.
- Indien de bedrijfstijd van batterij significant korter is dan voorheen, raadpleeg dan **mioglobal.com/support** om te weten te komen hoe u de huidige batterij kan vervangen.
- Raadpleeg de lokale regelgeving ter zake om te weten te komen hoe u de polsband of de batterij dient te recyclen.

MIO LINK GEBRUIKEN IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

- De Mio LINK is tot 30m waterdicht en kan ook gebruikt worden tijdens het zwemmen.
- **Belangrijk:** Druk onder water niet op de Toets.
- De nauwkeurigheid van de hartslagmeter kan verminderen in koud water of indien u grote armbewegingen maakt.
- Draag uw Mio LINK niet tijdens het duiken.
- Draadloze transmissie werkt niet onder water.
- Haal na het zwemmen de interne eenheid van de Mio LINK uit de polsband. Maak beide onderdelen schoon met water van de kraan en droog ze af met een handdoek.

ZORG DRAGEN VOOR UW MIO LINK

Uw Mio LINK schoonmaken

- Maak de optische sensor en de oplaadpennen schoon met een vochtige doek indien nodig. Gebruik zachte zeep om olie of vuil te verwijderen. Indien u uw Mio LINK vaak gebruikt dan is het raadzaam om hem elke week schoon te maken.
- Zorg ervoor dat er geen krassen worden gemaakt op of rond de optische sensor om beschadiging van uw Mio LINK te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw Mio LINK nooit wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën zoals benzine, solventen, aceton, alcoholen of insectenverdelgers. Chemicaliën kunnen de pakking, de behuizing en de afwerking beschadigen.
- Haal na het zwemmen de interne eenheid van de Mio LINK uit de polsband. Maak beide onderdelen schoon met water van de kraan en droog ze af met een handdoek.

Extra tips voor optimaal gebruik

- Haal uw Mio LINK nooit zelf uit elkaar en probeer hem ook nooit zelf te repareren.
- Bescherm uw Mio LINK tegen schokken, extreme temperaturen en langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.
- De Mio LINK is waterdicht tot maximaal 30 meter diep op voorwaarde dat de Toets niet wordt ingedrukt en de behuizing intact is.

MIO LINK SPECIFICATIES

Maximaal meetbare hartslag: 220 SPM

Minimaal meetbare hartslag: 30 SPM

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 45°C

Behuizing: ABS

Achterzijde van de behuizing: PC+GF

Oplaadpennen aan de achterzijde van de behuizing: SUS316

Band: Silicone

Waterbestendig: 30 m

Batterij: 60 mAh lithium-polymeer

Levensduur van de batterij (bij benadering): Tot 5 jaar

Magneten: Neodymium-ijzer-boor (NdFeB)

Identificatie via de radiofrequentie: Draadloze verbinding van 2,4 GHz ANT+ en *Bluetooth* Smart

GARANTIE EN JURIDISCHE BEPALINGEN

GARANTIE & DIENSTVERLENING

Raadpleeg mioglobal.com/support voor informatie over productondersteuning, online help, FAQ's, video's en gebruikershandleidingen voor uw product.

Informatie over de Beperkte Garantie

Dit product wordt aan de oorspronkelijke koper gegarandeerd vrij te zijn van defecten van kwaliteit, materiaal of fabricagefouten op het moment van levering voor de looptijd van de Beperkte Garantie (zie hieronder). Tijdens deze garantieperiode zal Physical Enterprises Inc. (Mio Global) naar eigen goeddunken dergelijke gebreken kosteloos verhelpen door a) reparatie of b) vervanging of c) terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief btw, verzendkosten, belastingen en gelijkaardige kosten) onder de voorwaarden en bepalingen van deze Beperkte Garantie. De verwerking van alle garantieorders wordt uitgevoerd door de distributeur van het product die is toegekend aan de geografische zone waarin de oorspronkelijke aankoop plaatsvond. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient contact opgenomen te worden met de winkel of dealer waar het product werd gekocht.

Looptijd van de garantie

De "Looptijd van de Beperkte Garantie" begint op de datum van aankoop, geldt voor één jaar en eindigt op de eerste verjaardag van de datum van aankoop. Het is mogelijk dat uw winkel/verkoper (of de importeur of de distributeur) u een langere looptijd heeft aangeboden als onderdeel van de verkoop. Mio Global is echter niet verantwoordelijk voor deze langere looptijd. Neem daarom contact op met uw winkel/verkoper voor meer informatie. De Looptijd van de Beperkte Garantie loopt automatisch af zonder aankondiging en deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar, indien (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global):

1. het product werd geopend of gemanipuleerd (behalve waar dit is toegestaan zoals beschreven in de desbetreffende documentatie, zoals bijvoorbeeld het correct aanbrengen van de batterijen);
2. het product een onderhoud heeft gekregen, uitgevoerd door iemand die niet gerelateerd is aan Mio Global;
3. het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; of
4. het product niet is aangekocht bij een erkende verkoper van Mio Global (neem contact op met Mio Global voor de lijst van erkende verkopers).

Raadpleeg mioglobal.com/support voor informatie over landspecifieke garantie.

Uitsluitingen en beperkingen

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing en klanten zullen geen vordering kunnen indienen in het kader van deze Beperkte Garantie of anderszins, voor:

1. problemen die ontstaan door foutief gebruik of ruw, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik (en zonder beperking van het voorgaande, schade ten gevolge van buigen of laten vallen van het product wordt geacht het gevolg te zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik);
 2. problemen die ontstaan door foutief gebruik in tegenstelling tot aanbevolen gebruik, of gebruik waarvoor het product is bedoeld;
 3. problemen die ontstaan door aanpassingen aan het product van Mio, zoals vocht of waterschade die afbreuk doen aan de goede werking van het product, en schade aan de behuizing van het product of zichtbare scheuren aan de voorkant;
 4. problemen die ontstaan door het gebruik van het product van Mio met gelijk welk ander product, toebehoren, software en/of dienst die of dat niet werd vervaardigd of geleverd door Mio Global; of
 5. vervangbare batterijen of gebruikershandleidingen noch voor items van een derde partij;
- in elk geval bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID; DISCLAIMERS

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS SLECHTS GELDIG EN AFDWINGBAAR IN HET LAND VAN AANKOOP. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE, VERPLICHTE WETTELIJKE BEPALINGEN:

1. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN, GARANTIEBEPALINGEN OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET;
2. DEZE BEPERKTE GARANTIE, NOCH ENIGE ANDERE GARANTIE, GARANTIEBEPALING, VERTEGENWOORDIGING OF TOESTAND, MET INBEGRIJ VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIE EN TOESTANDEN (OF VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ANDERSZINS) ZAL NOOIT VERDER REIKEN DAN DE LOOPTIJD VAN DE BEPERKTE GARANTIE.
3. MIO GLOBAL OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (GEZAMENLIJK, DE "FYSIEKE ENTITEITEN") KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF INDIRECTE SCHADE NOCH VOOR GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN VERWACHTE VOORDELEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN EVENTUELE VERVANGENDE APPARATUUR OF VOORZIENINGEN, VORDERINGEN VAN DERDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN HET ITEM OF ALS GEVOLG VAN INBREUK OP DE GARANTIE, VERBREKING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN JURIDISCHE OF BILLIJK THEORIE ZELFS ALS MIO GLOBAL WIST VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.
4. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GARANDEREN DE FYSIEKE ENTITEITEN NIET DAT DE WERKING VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT HET PRODUCT WERKT MET HARDWARE OF SOFTWARE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WERD GELEVERD EN WIJZEN ZIJ NADRUKKELIJK GELIJK WELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ONJUISTHEDEN OF

5. DE FYSIEKE ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING BIJ HET UITVOEREN VAN DE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE GARANTIE.

IN EEN AANTAL PROVINCIES, REGIO'S OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES OF TOESTANDEN TE BEPERKEN, OF IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE, UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN. INDIEN DIT VAN TOEPASSING IS IN DE PROVINCIE, STAAT OF HET RECHTSGEBIED VAN DE OORSPRONKELIJKE KOPER, DAN ZULLEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN BEHALVE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT. HET IS MOGELIJK DAT U SPECIFIEKE RECHTEN GENIET ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE. U KUNT ECHTER OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN EN NIETS IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL RESULTEREN IN EEN BEPERKING OF OPHEFFING VAN DE VERPLICHTE, WETTELIJKE RECHTEN.

Mio Global contacteren

Voor alle vragen over deze Beperkte Garantie neemt u contact op met Mio Global:



1.877.770.1116



support@mioglobal.com

COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

© 2014 Physical Enterprises Inc. Alle rechten voorbehouden. Mio en het logo van Mio zijn handelsmerken van Physical Enterprises Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen.

Mio® is een gedeponeerd handelsmerk van Physical Enterprises Inc.

iPhone® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.



ANT+™ is een handelsmerk van Dynastream Innovations Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en bijhorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Physical Enterprises Inc. of Mio is in overeenstemming de licentieovereenkomst.

Andere handelsmerken en merknamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaar.

WETGEVING & CONFORMITEIT

Het Overzicht met Wettelijke bepalingen van LINK kan gedownload worden op mioglobal.com/support.



Inwoners van de EU: Het is verboden dit product niet gesorteerd bij het huishoudelijk afval te voegen. U bent als eigenaar verantwoordelijk om dit product te recyclen.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING Physical Enterprises Inc. verklaart dat deze hartslagmeter (Mio LINK) in overeenstemming is met de EMC-richtlijn 2004/108/EC. Neem contact op per e-mail met support@mioglobal.com om een kopij van de Conformiteitsverklaring te ontvangen.

Indien er elektrostatische storingen optreden in de omgeving dan is het mogelijk dat dit product niet langer correct functioneert of een foutmelding zal weergeven. Indien dat gebeurt, dient u het product te resetten of naar een andere omgeving te gaan waar dergelijke storingen zich niet voordoen.

Model # 56P

Ontworpen in Canada

Made in China